



**ES** CINTURÓN LUMBAR

**DE** RÜCKENBANDAGE

PRO COMFORT  
PR-1273



## Manual de instrucciones

Este producto cumple con la directiva comunitaria 93/42/CE relativa a productos sanitarios.



## Manual de instrucciones

Incluye	4
Especificaciones técnicas	4
Símbolos empleados	4
Especificación de uso previsto	4 - 5
Indicaciones de seguridad	5
Colocación del vendaje	6
Limpieza y cuidado	7
Indicaciones para la eliminación	7
3 años de garantía	7
Servicio	12

## Bedienungsanleitung

Lieferumfang	8
Technische Daten	8
Verwendete Symbole	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	8 - 9
Sicherheitshinweise	9
Anlegen der Bandage	10
Reinigung und Pflege	11
Hinweise zur Entsorgung	11
3 Jahre Garantie	11
Service	12



Antes de utilizarlo, lea cuidadosamente las instrucciones de uso. ¡Consérvelas en todo caso para consultas posteriores! Si da el artículo a otra persona, entréguele también estas instrucciones de uso.

## Incluye

1 x Manual de instrucciones

1 x Cinturón lumbar

incluye 2 pelotas lumbares y correa de compresión

## Especificaciones técnicas

Perímetro de la cintura:

XS - M 66 - 82 cm

M - L 80 - 98 cm

L - XXL 96 - 116 cm

## Símbolos empleados



Tener en cuenta el manual de instrucciones



Fecha de fabricación



Identificación de lote



Fabricante

## Especificación de uso previsto

Este artículo ha sido fabricado para el uso privado y no se debe llevar más de 2-3 horas seguidas ni durante más de 6-8 horas al día.

## **Para usar como apoyo contra:**

1. dolores de espalda en la parte inferior de la columna vertebral (región lumbar, vértebras lumbares)
2. desgaste de las pequeñas articulaciones vertebrales (síndrome facetario lumbar)
3. agarrotamiento muscular
4. sobrecarga deportiva y corporal
5. hipermovilidad de la columna lumbar

## **No utilizar – o sólo después de consultar con su médico – en caso de:**

1. inestabilidad en alto grado de las vértebras lumbares
2. heridas externas
3. deficiencias neurológicas (dolores irradiantes del nervio o parálisis de las extremidades inferiores)
4. trastornos de la circulación sanguínea



## **Indicaciones de seguridad ¡Peligro de lesiones!**

- Si surgen problemas mientras lo lleva, quíteselo inmediatamente y consulte a un médico.
- No se ponga el vendaje demasiado apretado para que no le corte la circulación de la sangre.
- Antes de cada uso, compruebe que el vendaje no presenta rasgaduras ni deterioros.
- Sólo debe usarse el artículo si está en perfecto estado.
- No lleve el artículo mientras duerme ni durante largos periodos de reposo, por ej. si permanece mucho tiempo sentado.


## **¡Riesgo de inflamaciones e irritaciones de la piel!**

- En casos concretos, pueden aparecer reacciones e irritaciones de la piel.
- No lleve el artículo más de 6-8 horas al día ni más de 2-3 horas seguidas, y lave regularmente la zona corporal cubierta con el artículo, para evitar inflamaciones e irritaciones de la piel.
- Para prevenir reacciones alérgicas de la piel, ésta debe estar libre de geles, grasas, pomadas, aceites y sustancias similares. Si, a pesar de todo, surgen problemas, consulte inmediatamente a un médico.

## Colocación del vendaje


### Pelotas lumbares (extraíbles opcionalmente)

El vendaje está bien colocado cuando se nota que las pelotas lumbares se encuentran sobre el empuje de los glúteos.

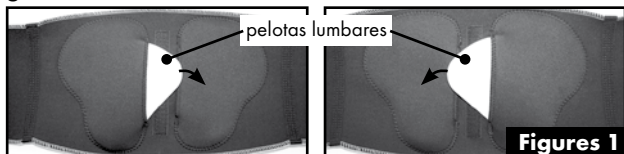

### Correa de compresión (desmontable opcionalmente mediante el cierre de velcro)

Con la correa de compresión se consigue una estabilización adicional de la región de las vértebras lumbares. Cuanto mayor es la tensión al ajustar la correa de compresión, mayor es la estabilidad que se consigue.

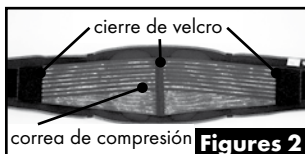


**Imagen 1:** antes de ajustar el artículo, suelte los cierres de velcro laterales de la correa de compresión.

**Imagen 2:** pegue el cierre de velcro del vendaje. El vendaje debe asentarse cómodamente y estar ligeramente tenso.

**Imagen 3:** tense la correa de compresión con ambas manos.

**Imagen 4:** cierre uno tras otro los cierres de velcro laterales de la correa de compresión.

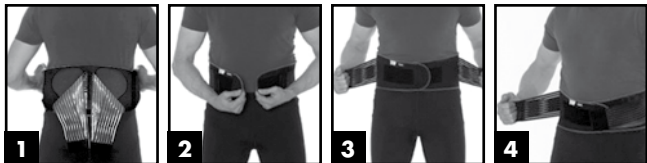

## Limpieza y cuidado



- Antes del primer uso del vendaje se debe lavar este profundamente.
- Se recomienda volver a lavar después de dos o tres usos.
- Cierre las piezas adhesivas durante el lavado.
- Después del lavado se debe enjuagar muy bien el vendaje.
- Lavar por separado.

## Indicaciones para la eliminación

¡Desechar embalaje y artículo de acuerdo con el medio ambiente y por separado! Desechar este artículo a través de una planta de eliminación autorizada o mediante la administración municipal.

Cumpla con las prescripciones en vigor.

## 3 años de garantía

Este producto se ha producido con mucho esmero y bajo un control constante. Con este producto tiene tres años de garantía a partir de la fecha de compra. Por favor, conserve el ticket de compra.

La garantía sólo es válida para fallos en el material y fallos de fabricación y no en caso de uso incorrecto o inadecuado del producto. Esta garantía no limita los derechos del comprador conferidos por la ley. En caso de que deba hacer uso de la garantía, póngase en contacto con nosotros utilizando nuestro servicio telefónico de atención al cliente o enviándonos un correo electrónico. En los dos casos recibirá una atención personalizada. Si debe hacer uso de la garantía, puede enviarnos gratuitamente las piezas defectuosas al servicio de reparaciones, previa consulta con nuestro servicio de atención al cliente. Le devolveremos una pieza nueva o la pieza arreglada de forma gratuita.

Mediante los servicios de garantía no se prolongará, ni renovará, el plazo de duración de la garantía de la herramienta. Esto también es válido para piezas de recambio o que hayan sido reparadas.

Una vez terminado el tiempo de garantía, las reparaciones ya no serán gratuitas.

IAN: 63728



Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie unbedingt für späteres Nachlesen auf! Wenn Sie den Artikel weitergeben, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

## Lieferumfang

1 x Bedienungsanleitung

1 x Rückenbandage inkl. 2 Lumbalpelotten und Kompressionsgurt

## Technische Daten

Taillenumfang:

XS - M 66 - 82 cm

M - L 80 - 98 cm

L - XXL 96 - 116 cm

## Verwendete Symbole



Bedienungsanleitung beachten



Herstellungsdatum



Chargenbezeichnung



Hersteller

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist für den privaten Gebrauch hergestellt und darf nicht länger als 2-3 Stunden durchgehend sowie nicht länger als 6-8 Stunden am Tag getragen werden.



## **Zur unterstützenden Anwendung bei**

1. Schmerzen in der unteren Wirbelsäule (Lumbalregion, LWS)
2. Verschleiß der kleinen Wirbelgelenke (lumbales Facettensyndrom)
3. Muskelverspannungen
4. sportlicher und körperlicher Belastung
5. Überbeweglichkeit der Lendenwirbelsäule

## **Nicht - oder nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt - anwenden bei:**

1. höhergradiger Instabilität der LWS
2. äußeren Verletzungen
3. neurologischen Defiziten (ausstrahlenden Nervenschmerzen oder Lähmungen der unteren Extremität)
4. Durchblutungsstörungen



## **Sicherheitshinweise Verletzungsgefahr!**

- Treten während des Tragens Probleme auf, entfernen Sie die Bandage sofort und konsultieren Sie einen Arzt.
- Legen Sie die Bandage nur so fest an, dass Ihre Blutzufuhr nicht eingeschränkt ist.
- Prüfen Sie die Bandage vor jedem Gebrauch auf Risse und Beschädigungen.
- Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.
- Tragen Sie den Artikel nicht während des Schlafens oder längerer Ruhephasen wie z.B. langem Sitzen.

## **Gefahr von Hautreizungen und Hautirritationen!**


- In Einzelfällen kann es zu Hautreaktionen und Reizungen kommen.
- Tragen Sie den Artikel nicht länger als 6-8 Stunden am Tag sowie nicht länger als 2-3 Stunden durchgehend, und waschen Sie von dem Artikel bedeckte Körperstellen regelmäßig, um Hautreizungen und Hautirritationen zu vermeiden.
- Zur Vermeidung von allergischen Hautreaktionen muss die Haut frei von Gelen, Fetten, Salben, Ölen oder ähnlichen Stoffen sein. Sollten dennoch Probleme auftreten, konsultieren Sie sofort einen Arzt.

# Anlegen der Bandage

## Lumbalpelotten (optional herausnehmbar)

Die Bandage ist richtig angelegt, wenn die


Lumbalpelotten fühlbar über dem Gesäßansatz liegen.

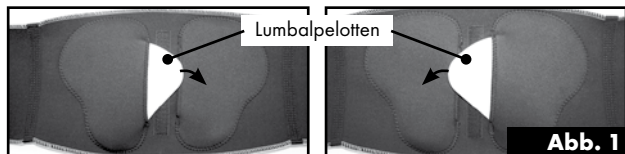

## Kompressionsgurt

### (optional per Klettverschluss abnehmbar)

Mit dem Kompressionsgurt wird eine zusätzliche Stabilisierung der Lendenwirbelsäulenregion erreicht. Je höher die Vorspannung bei Anlage des Kompressionsgurtes, desto größer der Stabilitätsgewinn.

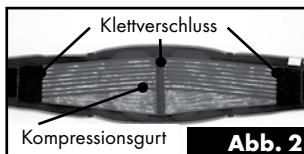

**Bild 1:** Lösen Sie vor dem Anlegen des Artikels die seitlichen Klettverschlüsse des Kompressionsgurtes.

**Bild 2:** Schließen Sie den Klettverschluss der Bandage. Die Bandage sollte bequem und leicht gespannt sitzen.

**Bild 3:** Spannen Sie den Kompressionsgurt mit beiden Händen.

**Bild 4:** Schließen Sie nacheinander die seitlichen Klettverschlüsse des Kompressionsgurtes.



## Reinigung und Pflege



- Vor dem ersten Gebrauch der Bandage sollten Sie diese gründlich waschen.
- Nach jeweils zwei- oder dreimaligem Verwenden empfiehlt es sich, einen weiteren Waschdurchgang durchzuführen.
- Schließen Sie die Klettstücke beim Waschvorgang.
- Nach dem Waschen sollten Sie Ihre Bandage gründlich durchspülen.
- Separat waschen.

## Hinweise zur Entsorgung

Bitte entsorgen Sie den Artikel auf eine umweltgerechte Art über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die aktuell geltenden Vorschriften.

## 3 Jahre Garantie

Das Produkt wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. Sie erhalten auf dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon auf. Die Garantie gilt nur für Material- und Fabrikationsfehler und entfällt bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere die Gewährleistungsrechte, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Im Garantiefall setzen Sie sich bitte über unsere kostenlose Service-Hotline oder per E-Mail mit uns in Verbindung. Wir werden Sie in jedem Fall persönlich beraten. Im Garantiefall können in Absprache mit unseren Service-Mitarbeitern defekte Teile unfrei an die aufgeführte Service-Adresse geschickt werden. Sie erhalten dann unverzüglich ein neues oder repariertes Teil kostenlos zurück. Die Garantiezeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

IAN: 63728

# **Servicio/Service**

## **Dirección del servicio técnico / Service-Adresse**

Ⓔ ☎ Línea directa de producto 00800-88080808  
(gratuita de lunes a viernes 10 - 16 horas)

Ⓓ ☎ Produkt-Hotline 00800-88080808  
(Mo.- Fr., 10:00 - 16:00 Uhr, gebührenfrei)

LARA • Gran Via 20-26 • E-07182 El Toro

es@nws-service.com

**- [www.nws-service.com](http://www.nws-service.com) -**

Versión para imprimir/Druckversion: 201106V1